


b. BLANDINO®

Soluzioni in movimento

Made in Italy
da oltre 60 anni

Sistemi *di* Postura

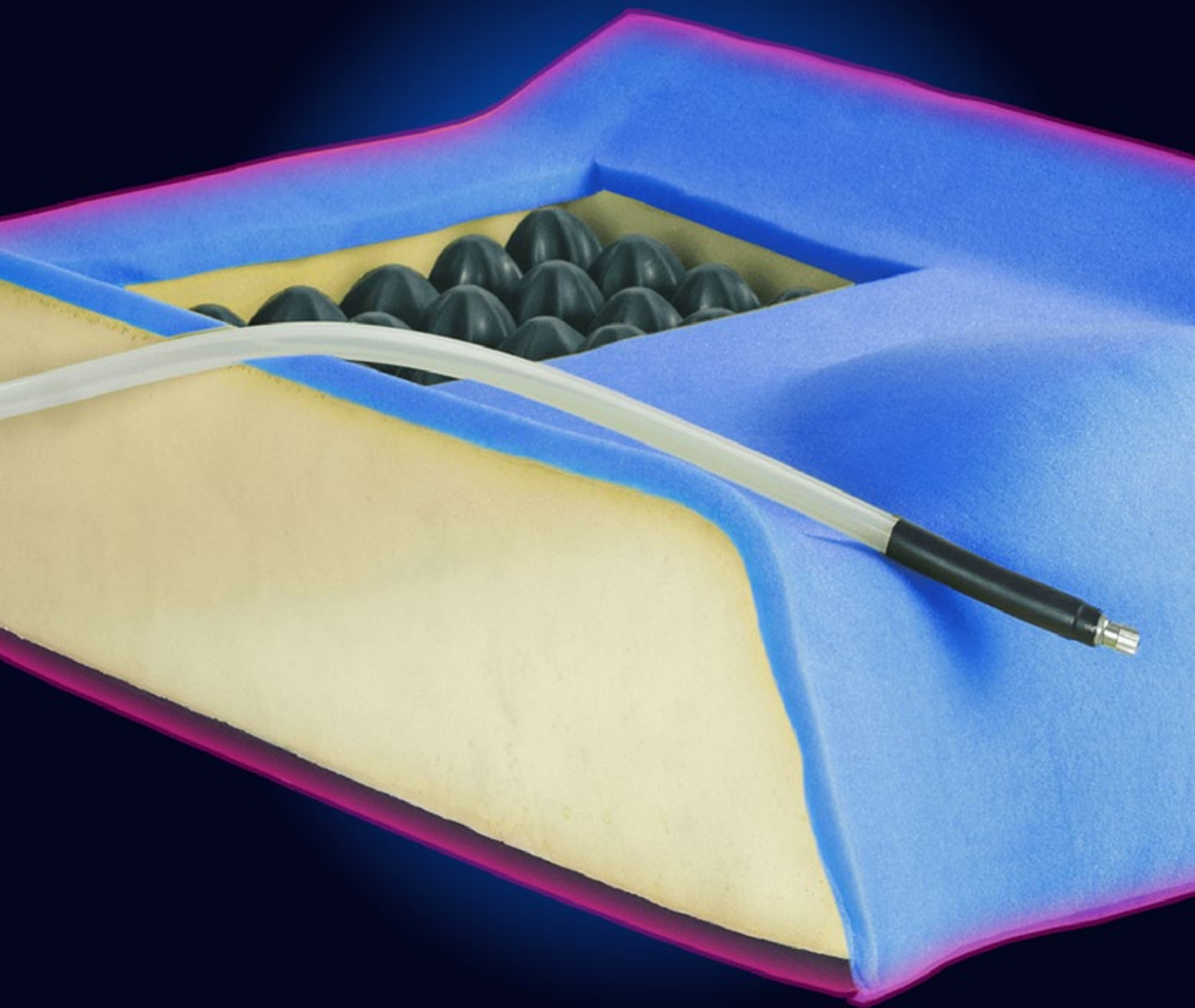

I Cuscini

Linea **b. Shape**

Linea



Shape

**Validi supporti per migliorare la vita quotidiana.
Robusti e sicuri offrono sempre stabilità e comfort.**

Costruiamo e progettiamo supporti posturali pensati per garantire stabilità, comfort e sicurezza in ogni situazione.

Tutti i sistemi posturali **b.Shape** sono realizzati in Italia con cura e con qualità artigianali. Per questo motivo è possibile effettuare personalizzazioni importanti e rendere la soluzione posturale veramente efficace.

Il nostro obiettivo è migliorare concretamente la qualità della vita quotidiana.

I Cuscini

Soluzioni comode per un supporto ottimale in ogni situazione

I cuscini posturali **b.Shape** sono studiati per fornire un valido supporto ed adattarsi alla corretta conformazione del bacino dell'utente.

La progettazione si basa su soluzioni che evitano lo schiacciamento dei tessuti sottocutanei in corrispondenza delle aree a maggior carico pressorio, al fine di prevenire il danneggiamento dell'epidermide.

La fodere sono realizzate con uno speciale tessuto traspirante che favorisce l'evacuazione dell'umidità residua della pelle.

Il trattamento opzionale AQUAZERO consente di mediare, nei casi di incontinenza, tra la protezione del tono cutaneo e la salvaguardia degli imbottiti.

Come riconoscere la soluzione più adatta a te



La nostra esperienza ci permette di progettare soluzioni idonee per ogni tipo di utilizzo. Prodotti per semplificare il movimento degli adulti, per accompagnare la crescita dei ragazzi e le gesta delle persone anziane. Prendiamo sempre in considerazione età, abitudini, caratteristiche dell'utilizzatore. Le nostre soluzioni sono confortevoli, affidabili e studiate per una movimentazione più autonoma dentro casa o all'aperto.

Misurazione Antropometrica

1

Nella scelta del cuscino si rende necessaria la rilevazione di due misure antropometriche: la larghezza del bacino e la profondità della seduta dal cavo popliteo al punto di appoggio sullo schienale.

Individuazione del modello

2

Il tecnico ortopedico abilitato sarà in grado di selezionare il cuscino posturale più adatto, tenendo conto delle condizioni patologiche dell'utilizzatore e delle indicazioni del medico prescrittore.

È fondamentale considerare anche l'aspetto preventivo, insieme alla necessità di stabilizzare il bacino.

Individuazione della misura del cuscino

3

Compatibilmente con l'ausilio su cui sarà installato il cuscino, le due misure da determinare sono la larghezza e la profondità, partendo dalle misure antropometriche rilevate.

•**LARGHEZZA:** Si consiglia di scegliere la misura più vicina al valore rilevato, arrotondandola, per garantire una stabilizzazione ottimale ed una corretta distribuzione dei carichi.

•**PROFONDITÀ:** È necessario considerare la geometria specifica di ciascun cuscino.

Scelta degli accessori disponibili

4

Per meglio rispondere alle esigenze specifiche dell'utilizzatore, è possibile personalizzare il cuscino scegliendo tra differenti accessori.

• **FODERA BIELASTICA IMPERMEABILE** o traspirante con trattamento idrofobo **AQUAZERO**

• **TASCA PORTAOGGETTI**

• **INSERTO POSTURALE MODELLABILE**

• **ISOLATORE DI CELLE**

Installazione sull'ausilio

5

Il tecnico ortopedico abilitato sarà in grado di installare i nostri cuscini posturali, in modo facile e veloce, assicurando una stabilizzazione ottimale ed una corretta distribuzione dei carichi, per offrire un supporto stabile e adeguato al bacino.



Descrizione

Il cuscino **b.Basic** rappresenta l'entry level dei nostri cuscini posturali. E' indicato a chi ha una buona tonicità cutanea e desidera un ottimo comfort abbinato ad una notevole stabilità di forma.

Classificazione ISO – RDM

Attenzione: i codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

ISO 18.09.39.006 modulo posturale per bacino

RDM 2789058/R

Caratteristiche Tecniche

- Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato con scarico passivo cocchigeo a portanza incrementale per una migliore distribuzione pressoria
- Rivestimento in memory foam POLAR bugnato da 2 cm che accentua le caratteristiche preventive e dona una immediata sensazione di comfort

qualità specifiche

PREVENZIONE



STABILIZZAZIONE




Misure Disponibili

Profondità	Larghezza			
	36	40	45	50
41	✓	✓	✓	✓
46	✓	✓	✓	✓

✓ = disponibile in tutte e tre le altezze

✗ = non disponibile

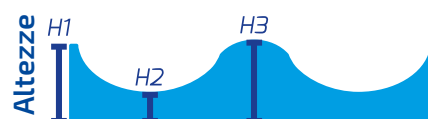

H1: 10 cm - H2: 7 cm - H3: 11 cm



Descrizione

Il cuscino **b.Flow** è un cuscino studiato per rispondere alle esigenze di coloro che necessitano di un eccellente grado di prevenzione antidecubito unito ad un contenimento posturale di forma.

Il posizionamento di materiale fluido all'interno del cuscino garantisce una maggiore stabilità posturale, limitando l'azione delle forze di taglio a carico degli ischi, offrendo inoltre un controllo ottimale della temperatura anche nei casi di caldo o freddo intensi.

Classificazione ISO – RDM

Attenzione: i codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

ISO 18.09.39.006 modulo posturale per bacino

RDM 2607006/R

Qualità specifiche

PREVENZIONE



STABILIZZAZIONE



Caratteristiche Tecniche


- Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato con scarico passivo cocchigeo a portanza incrementale per una migliore distribuzione pressoria
- Sacca gel a settori con fluido ad alta inerzia termica, posizionata nella zona ischio sacrale, che minimizza gli sbalzi caldo/freddo

Misure Disponibili

Profondità	Larghezza			
	36	40	45	50
41	✓	✓	✓	✓
46	✓	✓	✓	✓

✓ = disponibile in tutte e tre le altezze

✗ = non disponibile

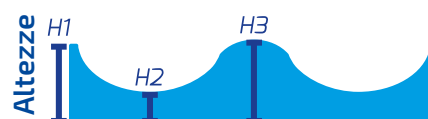

H1: 10 cm - H2: 7 cm - H3: 11 cm



Descrizione

Il cuscino **b.Cell** è un cuscino nato per coniugare il contenimento posturale di forma con il massimo grado di prevenzione del decubito nella zona ischiatica. Particolarmente indicato nelle situazioni di simmetria, di lieve asimmetria o comunque non richiedenti una personalizzazione modulare.

Sotto il profilo preventivo, l'inserto a bolle d'aria in caucciù naturale fornisce un eccellente grado di prevenzione e permette, con l'utilizzo dell'isolatore di celle (opzionale), di andare a scaricare completamente una zona precedentemente arrossata. Qualora si necessiti di un maggiore grado di personalizzazione posturale, l'inserto rigido modellabile permette di creare posizionamenti specifici.

Classificazione ISO – RDM

Attenzione: i codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

ISO 18.09.39.006 modulo posturale per bacino

RDM 2789097/R

Qualità specifiche

PREVENZIONE



STABILIZZAZIONE



Caratteristiche Tecniche


- Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato
- Inserto a bolle d'aria a 1 valvola, realizzato in caucciù naturale, con possibilità di installazione, se necessario, dell'isolatore di celle, che permette lo scarico completo di una zona specifica
- Rivestimento in memory foam POLAR da 1 cm che ne accentua le caratteristiche tecniche specifiche

Misure Disponibili

Profondità	Larghezza			
	36	40	45	50
41	✗	✗	✗	✗
46	✓	✓	✓	✓

✓ = disponibile in tutte e tre le altezze

✗ = non disponibile

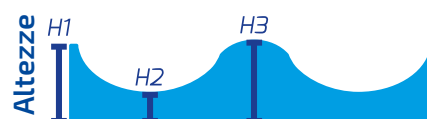

H1: 10 cm - H2: 7 cm - H3: 11 cm



Descrizione

Il cuscino **b.Cell duo** è un cuscino studiato e prodotto per coniugare i tre aspetti fondamentali di un sistema di postura per il bacino: contenimento posturale di forma, massimo grado di prevenzione del decubito nella zona ischiatica, facilità di gestione delle situazioni in cui vi sia una marcata obliquità o rotazione del bacino.

Dal punto di vista posturale, grazie all'insero a due settori differenziati, risulta particolarmente indicato nelle situazioni di forte asimmetria, obliquità o rotazione del bacino che non richiedono una personalizzazione modulare.

Le celle d'aria in caucciù naturale forniscono inoltre un altissimo grado di prevenzione.

Classificazione ISO – RDM

Attenzione: i codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

ISO 18.09.39.006 modulo posturale per bacino

RDM 2789110/R

Qualità specifiche

PREVENZIONE



STABILIZZAZIONE



Caratteristiche Tecniche


- Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato
- Insero a bolle d'aria a 2 valvole, realizzato in caucciù naturale, con facile accesso frontale ed apposita tasca a scomparsa
- Rivestimento in memory foam POLAR da 1 cm che ne accentua le caratteristiche tecniche

Misure Disponibili

		Larghezza			
		36	40	45	50
Profondità	41	✗	✗	✗	✗
	46	✓	✓	✓	✓

✓ = disponibile in tutte e tre le altezze



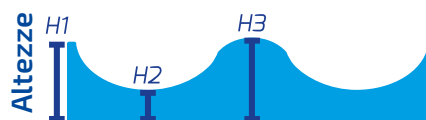

✗ = non disponibile



H1: 10 cm - H2: 7 cm - H3: 11 cm

Accessori

✓ = disponibile X = non disponibile

		basic	flow	cell	cellduo
	Fodera bielastica impermeabile	✓	✓	✓	✓
	Fodera traspirante AQUA 0 (idrofobo)	✓	✓	✓	✓
	Tasca portaoggetti	✓	✓	✓	✓
	Inserto posturale modellabile STABILIZZAZIONE	✓ ●●●●○	✓ ●●●●○	✓ ●●●●○	✓ ●●○○○

Conformità

Conforme ai requisiti previsti dal Regolamento **2017/745/MDR**


Codici **RDM 2789058/R, 2607006/R, 2789097/R, 2789110/R**


Codice **ISO 18.09.39.006***

*Il codice ISO riportato è indicativo e soggetto ad approvazione da parte del medico prescrittore




Riferimenti di contatto

 **Sede:** Corso Novara, 25 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALY

 **Ordini / Commerciale:**
+39 011 2277481


 **Sup. Tecnico / Assistenza:**
+39 011 2277482

 **Informazioni:**
info@blandinocare.it

 **Ordini / Commerciale:**
commerciale@blandinocare.it

 **Sup. Tecnico / Assistenza:**
assistenza@blandinocare.it

 **Sito:**
www.blandinocare.it

 **I nostri orari:**
da Lunedì a Venerdì:

Mattino: 8.00 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 17.00