

b. BLANDINO®

Soluzioni in movimento

Made in Italy
da oltre 60 anni



STEP

Linea
b. Swing

Base di mobilità basculante

Codice ISO (DPCM 12/01/2017)*: 12.27.04.003, 12.27.91.021, 12.27.91.024, 12.27.91.039

*Il codice ISO riportato è indicativo e soggetto ad approvazione da parte del medico prescrittore



STEP rappresenta un'innovazione tecnologica nel campo degli ausili per la disabilità. Il suo telaio facilmente configurabile è progettato per adattarsi alle diverse esigenze degli utilizzatori, offrendo comfort e supporto anche in situazioni patologiche specifiche.

L'elemento distintivo di STEP è l'integrazione degli ammortizzatori sulle ruote volta a garantire spostamenti sicuri ed agevoli.

Gli assistenti ed il personale tecnico specializzato apprezzano la facilità di regolazione in continuo su più taglie e la disponibilità di accessori opzionali che rendono il telaio estremamente versatile e personalizzabile.



Caratteristiche Tecniche

- Telaio in acciaio al carbonio ad alta resistenza, di solida costruzione e garantito a vita.
- Basculamento dell'utilizzatore fino a +45° per la riduzione completa del carico pressorio.
- Facilitazione del passaggio dalla posizione seduta a quella eretta con il basculamento a -5°.
- Possibilità di regolazione asimmetrica del piatto seduta e dello schienale per accogliere qualsiasi tipo di sistema di postura.
- Ideale per ambienti domestici e spazi ristretti grazie al design compatto.
- Operazione di basculamento facilitata da molle a gas anche per assistenti con poca forza.
- Adattabilità ai cambiamenti ponderali e dimensionali degli utilizzatori con la seduta regolabile in larghezza ed in profondità e lo schienale allargabile in continuo.
- Maggiore scorrevolezza grazie alla regolazione del baricentro della base della seduta.
- Comfort ottimizzato con i braccioli ribaltabili ed i fianchetti laterali del bacino orientabili per un corretto posizionamento degli arti inferiori.
- Ammortizzatori sulle ruote anteriori e posteriori per un maggior confort durante la movimentazione in esterno.
- Fianchetti abbattibili con un sistema semplice ed intuitivo di sblocco.
- Poggiambraccioli estraibili e ruotabili per facilitare il posizionamento sulla carrozzina.
- Supporti per gli arti inferiori facilmente regolabili in altezza, profondità e sulla flessione-estensione.
- Poggiambraccioli orientabili sul piano verticale ed orizzontale.




Basculamento

Basculamento della seduta da -5° a +45°



Seduta Regolabile

Piatto seduta regolabile anche in modo asimmetrico.
Seduta e schienale regolabili in continuo nelle taglie 36 cm ÷ 50 cm.

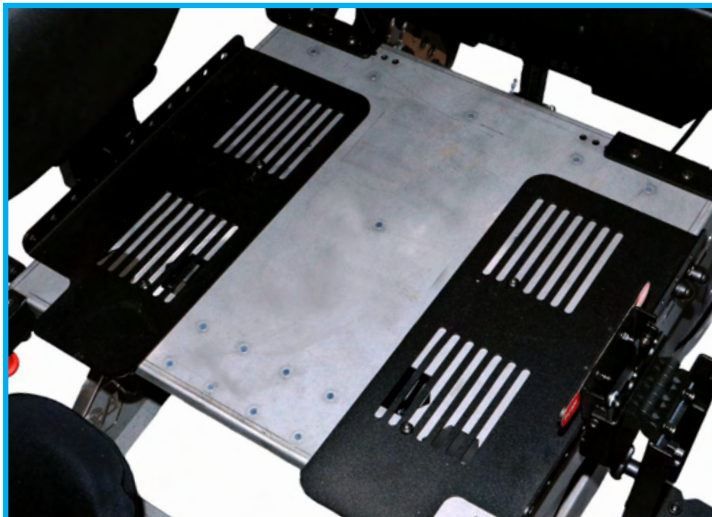

Braccioli

Ribaltabili, regolabili in altezza, profondità e orientamento sul piano verticale ed orizzontale.



Baricentro

Baricentro regolabile sulla profondità per mantenere costante la dinamica di basculamento.



Fianchetti

I fianchetti imbottiti sono abbattibili lateralmente fino a 180° per facilitare il trasferimento dell'utente


Poggiagambe

I poggiagambe sono estraibili e ruotabili per facilitare il posizionamento sulla carrozzina



Maniglione

La regolazione dell'inclinazione del maniglione risponde alle esigenze di presa del caregiver

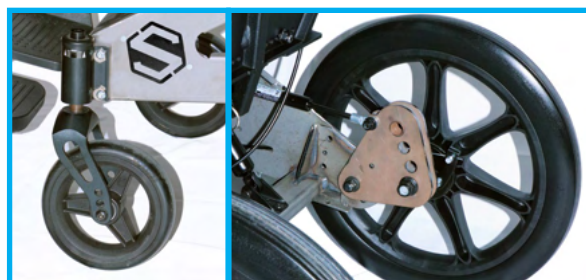

Ruote

Le ruote anteriori e posteriori ammortizzate donano un maggior confort durante la movimentazione in spazi esterni



b. BLANDINO®

Soluzioni in movimento

Dimensioni

Larghezza seduta	Larghezza esterna	Altezza schienale	Altezza seduta	Profondità seduta	Altezza bracciolo
da 36 a 50 cm	da 59 a 71 cm	da 95,5 a 102,5 cm	41-43,5-46 cm	da 42 a 50 cm	da 72,5 a 78 cm
Profondità	Profondità	Peso Totale	Portata Max.	Basculamento	Reclinaz. Schienale
93 cm	100,5 cm	da kg 38 a 47	kg 120	da -5° a 45°	da 0° a 25°

Colori disponibili

★ BASE ✓ DISPONIBILE

PANTONE	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	NO	NO	RAL
	1013	2004	3020	5013	5015	6009	7013	7016	7044	9005	RAL	RAL	su
	Perla	Arancio	Rosso	Blu	Azzurro	Verde	Brunito	Antracite	Seta	Nero	Ferro	Rame	Campione
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓	✓	✓

Conformità

Conforme ai requisiti previsti dal Regolamento 2017/745/MDR
RDM 2590205/R

Codice ISO (DPCM 12/01/2017)*: +

*Il codice ISO riportato è indicativo e soggetto ad approvazione da parte del medico prescrittore



Riferimenti di contatto

Sede: Corso Novara, 25 - 10078
Venaria Reale (TO) - ITALY

Ordini / Commerciale:
+39 011 2277481

Sup. Tecnico / Assistenza:
+39 011 2277482

Informazioni:
info@blandinocare.it

Ordini / Commerciale:
commerciale@blandinocare.it

Sup. Tecnico / Assistenza:
assistenza@blandinocare.it

Sito:
www.blandinocare.it

I nostri orari:
da Lunedì a Venerdì:

Mattino: 8.00 - 12.30
Pomeriggio: 13.30 - 16.30